移動用リフト

いうら ベッドサイド用リフト IL-210

new

TAISコード 00084-000143

●耐荷重120kgの寝室用リフト。
●15度間隔でアームがロックできる
アーム旋回ロック機能つき。

※スリングシートは別売りになります。



自重:77.5kg

レンタル価格 ¥20,000		
利用者負担額	(1割) ¥2,000	(2割) ¥4,000 (3割) ¥6,000

■コードNo.21851-61

パラマウントベッド エレベオ

TAISコード 00170-001544

●ベッド設置式リフト(パラマウントベッド製)。
●垂直昇降方式。
●ベッドの高さ調節も操作できる
手元スイッチ。

●最大利用者体重100kg



自重:78kg

レンタル価格 ¥24,000		
利用者負担額	(1割) ¥2,400	(2割) ¥4,800 (3割) ¥7,200

■コードNo.21851-51

ミクニ ミクニマイティライトⅢ

TAISコード 00139-000027

●姿勢を起こしやすい2点式ハンガーを採用。
●前輪は40mmのダブルタイプなので
取り回しが楽にできます。

●幅67~101cm×奥行113cm×
高さ53~163.5cm



自重:34.5kg

レンタル価格 ¥18,000		
利用者負担額	(1割) ¥1,800	(2割) ¥3,600 (3割) ¥5,400

■コードNo.21849-12

TOTO バスリフト

TAISコード 00187-000247

●浴槽の上にのせるだけ、
リモコンで簡単に操作できます。
●シートは取り外し可能、
場所を取らないコンパクト設計です。
●電源はバッテリー充電式です。
(充電時間50分)
※連続使用回数20回

●幅64.5~76cm×奥行57.5cm×高さ15cm
●使用体重35kg~100kg



自重:20kg

レンタル価格 ¥15,400		
利用者負担額	(1割) ¥1,540	(2割) ¥3,080 (3割) ¥4,620

■コードNo.21852-31・41

スリングシート(販売品)

スリングシートにはさまざまな種類があります。身体機能や体格、使用目的、使用環境に合ったものをお選びください。

エヴァシリーズ脚分離タイプ(フルタイプ)



●首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。
●車椅子に座ったままでセットすることが出来ます。
●吊り上げと同時に自動的に着座姿勢へと変換できます。
●頸部保持機能により過屈曲を抑制する構造です。

販売価格(税込) (小)¥57,200 (中)¥57,200

エヴァシリーズ脚分離タイプ(ハーフタイプ)



●最もスタンダードなタイプで首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。
●車椅子に座ったままでセットすることができます。
●ストラップ長さ調整により、多様な角度設定が可能。
●サイドメッシュで入浴も快適。

販売価格(税込) (小)¥46,200 (中)¥46,200

ベッド専用シート パオ(フルタイプ)



●首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。
●通気性と体圧分散機能により床ずれ予防効果があります。
●あらかじめベッドに敷いた状態から吊り上げることができます。

販売価格(税込) ¥63,800
※大中小兼用

ベッド専用シート パオ(ハーフタイプ)



●最もスタンダードなタイプで首や体幹の支持力が比較的ある方に使用します。
●通気性と体圧分散機能により床ずれ予防効果があります。
●あらかじめベッドに敷いた状態から吊り上げることができます。

販売価格(税込) ¥51,700
※大中小兼用

種 類

ベルト型
●2本のベルトからなっており、装着が簡単です。
●座位能力が十分にある方に使います。


脚分離型/ローバック
●背中までの丈のスリングシートです。
●頭部保持力および座位能力がいくらかある方に適しています。


脚分離型/ハイバック
●頭部までカバーできるスリングシートです。
●頭部の支持力が十分にない方でも使用できます。


脚分離型/トイレ
●お尻の部分が大きく空いているのが特徴です。
●トイレや入浴の他、座位能力がある方の場合には車いすへの移乗などにも使用できます。

シート型
●背中から脚にかけて、すっぽりと包むタイプのスリングシートです。
●体の下全体に敷き込むため、車いす上での着脱はできません。

装着方法

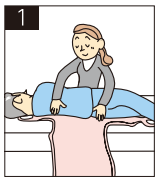

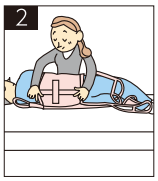


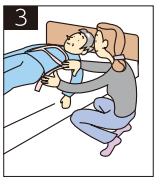



ベッド上の場合

1. お尻の位置に合わせます。
2. 背骨にスリングシートの中央を一致させます。
3. 手前側のスリングシートを引き出します。
4. 太股にくぐらせ、交差させます。

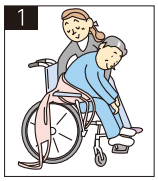







車いす上の場合

1. 背骨に沿って座面まで差し込みます。
2. お尻を十分におおいます。
3. 太股にくぐらせ、シワを伸ばします。
4. 左右の長さを確認し、交差させます。